




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS barre d'appui pour douche 1000 x 1090 mm RT144000
Couleur	VVS:777569700 NRF:6311235 RSK:8180962 EAN:5708590247649 HMI: 42068 NBS:N13:436 Blanc
Description	 PLUS barres d'appui sont des produits de haute qualité, pouvant s'associer d'innombrables façons, pour parfaire l'aménagement d'une salle de bains fonctionnelle et flexible. Une solution de barres d'appui stable avec une profusion de combinaisons possibles pour faciliter le chemin vers l'autonomie. Ensemble PLUS barre d'appui pour douche, diamètre 33 mm. A : 1000 mm. x B : 1090 mm, pour montage fixe. Peut être équipé d'un support de douchette RT600. Lorsque de la barre montée, la distance qui sépare la barre du mur est de 50 mm, distance idéale pour bien saisir la barre. Rosace murale, qui cache les vis de montage est incluse. Matériaux: aluminium laqué par poudrage, matière synthétique. Livré sans vis de montage.
Capacité du produit	Charge maximale : 235 kg. Lorsque le barre d'appui est chargé de 235 kg, chaque vis de montage est chargé de 56 kg. <i>Barres d'appui sont testé avec un facteur de sécurité de 1,5 selon les exigences de NF/ISO 17966:2016.</i>
Matériaux	Aluminium laqué par poudrage. Cache-vis: Plastique cycoloy Collier: Nylon
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.

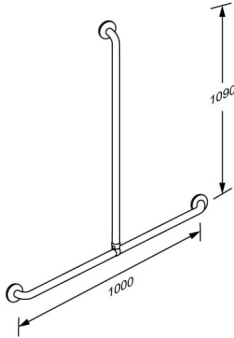

PRESSALIT®



Article	PLUS barre d'appui pour douche 1000 x 1090 mm
Numéro article	RT144000
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Surfanios Premium Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences de la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.








PRESSALIT®

Article	PLUS barre d'appui pour douche 1000 x 1090 mm
Numéro article	RT144000

Installation dans de différents types de mur

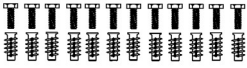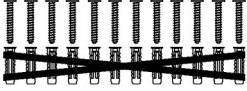	Béton >B25 V8617 - Kit vis de montage, 12 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément. 
	Brique pleine >= Mz12 V8617 - Kit vis de montage, 12 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément. 
	Parpaing plein >= Hlz12 V8617 - Kit vis de montage, 12 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément. 
	Béton cellulaire P4 V8667 - Kit vis de montage, 12 boulons M5 x 50, chevilles FTP K 6. Doit être commandé séparément. 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8617 - Kit vis de montage, 12 vis Ø5 x 50, chevilles SX8. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément. 

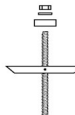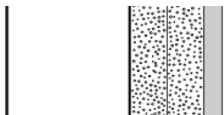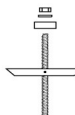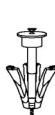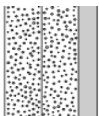

Article Numéro article	PLUS barre d'appui pour douche 1000 x 1090 mm RT144000	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (12 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	  
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (12 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	  
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.	