




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS dossier, pour montage fixe R6310000
Couleur	VVS:777538000 NRF:6311138 EAN:5708590314211 HMI: 71811 NBS:N13:426 FDA:INN/D135865 Blanc
Description	 PLUS dossier, 293 mm, pour montage fixe. Matériaux : aluminium, mousse de polyuréthane douce avec noyau en bois. Vis de montage pour brique pleine incluses. PLUS dossier, 293 mm, pour montage fixe. Matériaux : aluminium, mousse de polyuréthane douce avec noyau en bois. Vis de montage pour brique pleine incluses.
Réglage	Montage fixe
Capacité du produit	Charge maximale admissible : 100 kg.
Matériaux	Le dossier est fait de mousse polyuréthane (PU) teintée dans la masse et recouverte d'un vernis (PU) protecteur et antidérapant souple et transparent.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.

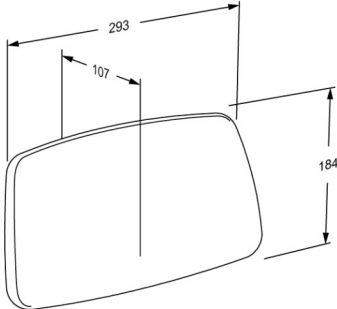

Article	PLUS dossier, pour montage fixe
Numéro article	R6310000
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Erisan OXY+ Tvättspit 70% CaviCide surface désinfectant decontaminant cleaner Rodalon Desinfektionsspray Terralin protect (SCHÜLKE+) Dismonzon Plus (BODE Chemie GmbH) NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Wetrok Caledor (Wetrok) Petrosol Citro (Büfa) Important : surfaces polyuréthanes sur les sièges de douche PLUS et dossier PLUS contiennent un revêtement antibactérien, qui risque d'être détruit si un nettoyant autre que du savon et de l'eau est utilisé pour le nettoyage. Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.