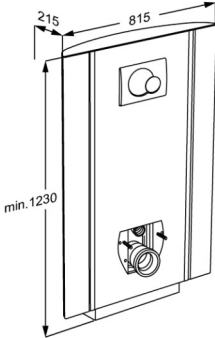




PRESSALIT®

Article Numéro article	SELECT TL2 ensembles WC avec glissières-support, sortie verticale R8312000
Couleur	VVS:617996400 NRF:6191027 EAN:5708590341514 HMI: 105974 Blanc 
Description	Notre ambition est de faciliter la vie quotidienne de l'utilisateur. De lui permettre d'aller aux toilettes de manière aussi aisée que possible. SELECT TL2 ensemble wc, réglable en hauteur électriquement de 400 mm par télécommande filaire. Incluant réservoir encastré avec mécanisme de chasse à 3/6 l. Cuvette wc et abattant à commander séparément. Les glissières-support verticales intégrées permettent l'équipement de barres de relèvement PLUS. Sortie verticale. Matériaux : aluminium anodisée et polystyrène (PS). Livré sans vis de montage.
Réglage	Réglable en hauteur
Hauteur de réglage	400 mm
Capacité du produit	Poids maximum de l'utilisateur : 200 kg. Charge maximale : 235 kg (poids d'utilisateur + accessoires). Lorsque l'ensemble wc est chargé de 235 kg, chaque vis de montage est chargé de 65 kg. <i>Ce produit a été testé statiquement avec 600 kg, ce qui est exigé par les normes appliquées. Veuillez noter, que la plupart de wc compatibles avec ce produit, ont été testé jusqu'à 400 kg.</i>
Vitesse en montant	Vitesse en montant: 12 mm/s Vitesse en descendant: 12 mm/s
Niveau sonore	48 dB



PRESSALIT®

Article Numéro article	SELECT TL2 ensembles WC avec glissières-support, sortie verticale R8312000
Matériaux	Aluminium anodisé. Les plaque frontales sont en polystyrène. La plaque supérieure en stratifié compact. <i>Testé d'inflammabilité (ISO 8191-1 et ISO 8191-2). Rapport de test disponible.</i>
Ergonomie	Décliné dans trois coloris assortis aux salles de bains modernes, l'ensemble WC contribue à une atmosphère agréable et raffinée. Les angles et bords arrondis facilitent et accélèrent le nettoyage. Aucun rebord ni cavité non visibles où la saleté risque de s'accumuler.
Fonctions	L'ensemble WC est disponible avec une commande manuelle qui permet à l'utilisateur ou à la personne chargée de l'assister de régler la hauteur du WC en toute facilité. La hauteur d'assise peut être ajustée sur 400 mm, de 425 à 825 mm, y compris pendant que l'utilisateur est assis sur le WC.
Raccordement électrique (V)	230
Vérin	LA31 Careline, (Linak), 4000N, IPX6
Boîte de contrôle	CB9 Careline, (Linak), IPX6
Télécommande filaire	HB3 (Linak), IP66
Consommation d'électricité	Consommation d'électricité en charge maximale: 70 W Consommation d'électricité en veille: 2 W
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



PRESSALIT®

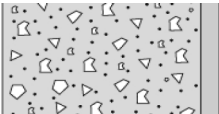
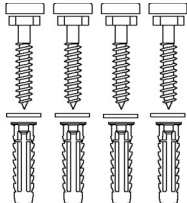
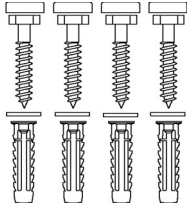
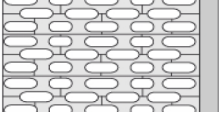
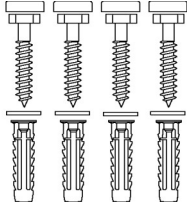
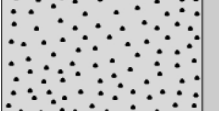
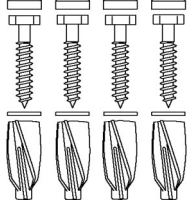
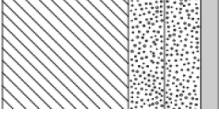
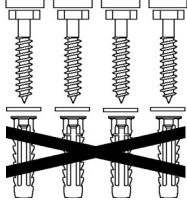
Article	SELECT TL2 ensembles WC avec glissières-support, sortie verticale
Numéro article	R8312000
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Surfanios Premium Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.
Déclaration de conformité	Ce produit répond aux exigences propres à : - la réglementation (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux - la directive 2006/42/CE du Conseil sur les mécanismes - la directive 2011/65/UE sur RoHS.



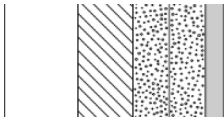
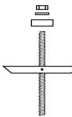
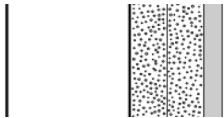
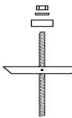
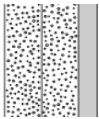
PRESSALIT®

Article	SELECT TL2 ensembles WC avec glissières-support, sortie verticale
Numéro article	R8312000

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8605 - Kit vis de montage, 4 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12, avec couvercles à vis gris. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8605 - Kit vis de montage, 4 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12, avec couvercles à vis gris. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8605 - Kit vis de montage, 4 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12, avec couvercles à vis gris. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8655 - Kit vis de montage, 4 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles GB14, avec couvercles à vis gris. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8605 - Kit vis de montage, 4 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12, avec couvercles à vis blancs. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



Article Numéro article	SELECT TL2 ensembles WC avec glissières-support, sortie verticale R8312000		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.		

C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des fixations murales appropriées.